

Cadence SPB V17.4 軟體程式下載流程

Cadence SPB V17.4 版本已正式發行,Cadence 提供『維護期間內』的 Allegro 與 OrCAD 客戶 至Cadence Online Support 網站下載取得 SPB V17.4 軟體程式。取得最新 SPB V17.4 軟體程式相關下載方式,請參考內文說明。

- Cadence Online Support 網站帳號註冊步驟 -----p. 2
- 軟體程式下載操作流程 ----- p.12
- License 線上申請流程 ----- p.14

· Date: 2020 / 01 / 10

· Author: Graser SPB AE Group

· Revision: 1.0

· Version: V17.4

・備註:

Graser® http://www.graser.com.tw



Cadence SPB V17.4 軟體程式下載流程

Cadence SPB 軟體於 V17.4 版本開始推廣線上下載,使用者可於 Cadence Online Support 網站中使用 HostID / OrCAD Reference Key Code 註冊帳號後,取得下載軟體程式用於安裝及更新。 註冊與下載如下:

Cadence Online Support 網站帳號註冊步驟


Cadence 原廠提供在維護期間的使用者一個免費的資源共享平台(以前為 Sourcelink 網站,現已更改為 Cadence Online Support 網站),該網站除了可以讓客戶取得最新 EDA 的訊息外,另也提供最新的軟體 與修正程式下載 (Software Update)或 QIR 及解決方法 (Solution)...等等的服務功能。其網址為 http://support.cadence.com 。

注意事項:Cadence Online Support 網站必須以有效的帳號及密碼登入,軟體在維護期間的客戶必須先行註冊並取得有效帳號及密碼後,才能登入此網站並使用其服務。

註冊 Cadence Online Support 帳號,請依下列步驟進行:


Graser

1. 開啟 http://support.cadence.com 網頁,請點選下方的「Register Now」。

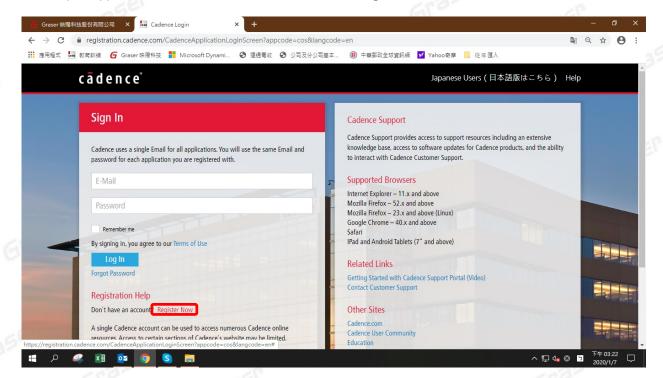




2. 進入頁面後請填入要註冊使用的公司 Email(下圖紅色框部分)· Site Language 則請選取「English」· 勾選 Terms of Use 最後再點選「Accept & Continue」 鍵並進行到下一步驟。

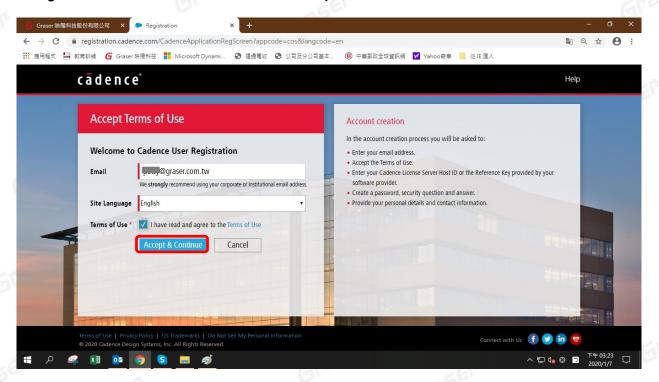


稍後請收 Mail 應會收到一封 Cadence 寄來的信件如下,請複製 OTP(一次性密碼)的碼備用,並點擊 Validate Email 底下的連結以確認此 Email 帳號是有效的。

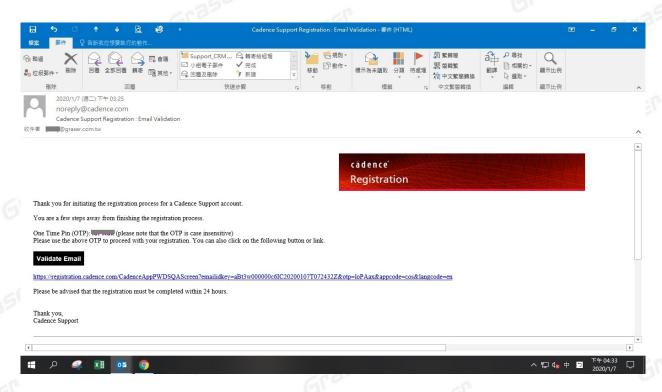

Grasel



3. 回原網頁這邊請貼入剛剛郵件的 OTP 碼 (一次性密碼),再到底下「New Password」和「Confirm New Password 」中輸入密碼 (須符合右側規則,如 6 個字以上 / 含大小寫 / 最少一個數字 /...若不符那項就會紅燈)。若輸入密碼符合規則,這樣底下的「Continue」鍵才會亮起,請點擊往下一步。 PS. 若相距過久要產生新的 OTP 碼,才請點「Resend OTP」,請再重收 Mail 複製,但此動作通常不需要。

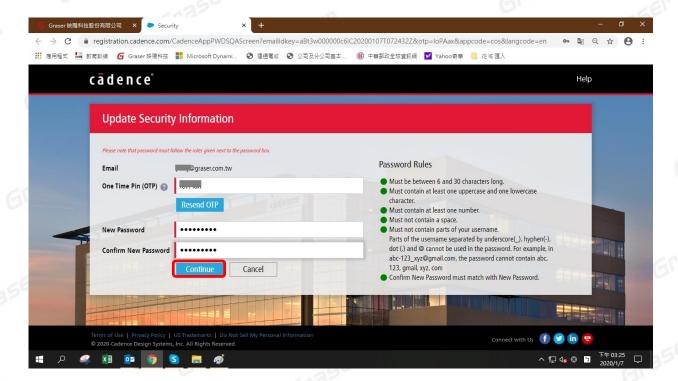




Graser

- 4. 在下面網頁畫面中,請在底下欄位中填入您的 License 認證的資料:
 - Allegro 使用者:(Allegro / Sigrity /... 如 Allegro PCB / APD /... 不含 OrCAD PCB) 請選 Host ID · License 若是鎖網路卡 · 則請填入 12 碼的網路卡卡號 MAC Address; 若是鎖 Dongle Key · 則請在 Host ID 欄位中填入 Dongle key 的號碼(9-XXXXXXXX)。
 - OrCAD 使用者:(Capture / CIS / PSPICE /...含 OrCAD PCB) 請選 Reference Key · 請填入授權書上的 Reference Key 號碼 (311-GRAXXXX-XXXXXX)。

最後再點擊「Continue」按鍵繼續下一步。

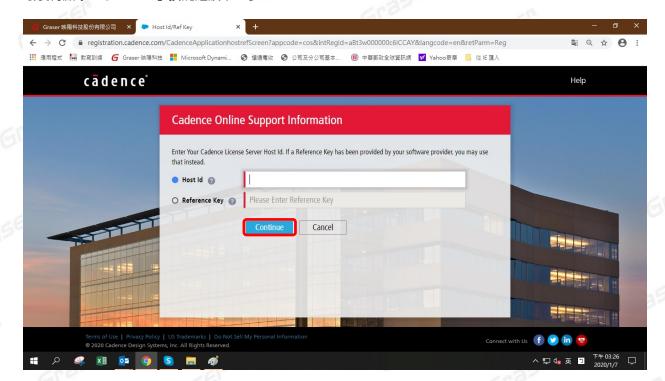




有關「Host Id」的號碼或「Reference Key」號碼查詢·請參考下頁授權書(有護貝的那張)範例標示位置。






5. 接著請填寫個人相關資訊·如公司名 / 名稱 / 姓氏 / 地區 / 地址 /... 及右側的職稱及職掌等資料·填寫完畢請點擊「Continue」按鍵繼續下一步。

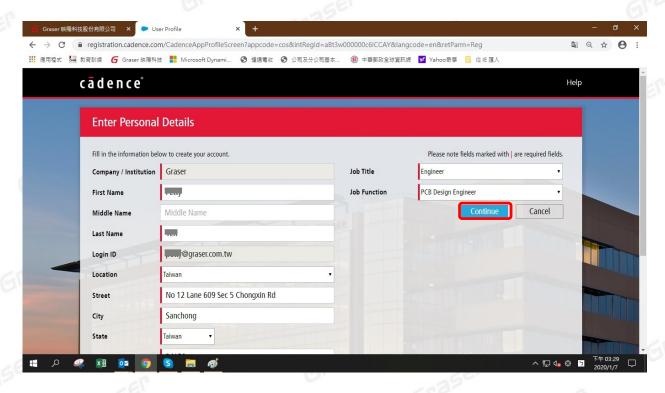


6. 畫面會顯示註冊完成,您可點擊「Back To Login」進到登入畫面,開始使用 Support.cadence.com。

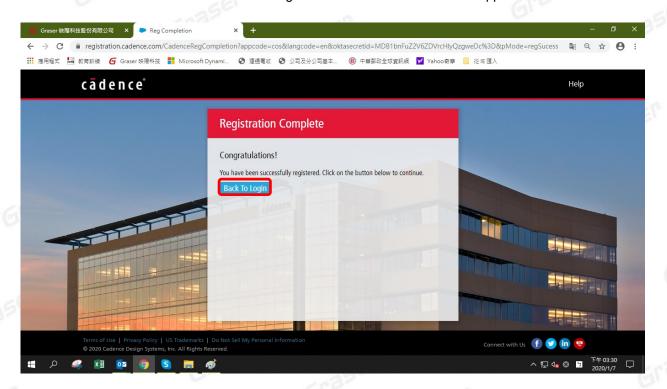


Grasei



在您所登錄的電子郵箱也會收到 Cadence 所寄的確認信,裡面會有歡迎訊息及相關提醒

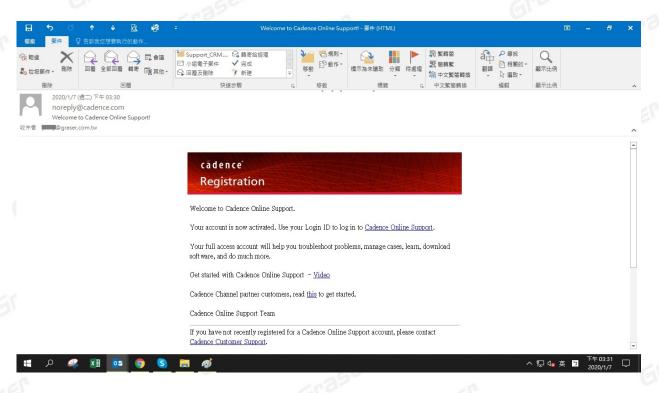


7. 當第一次登入開始使用 Support.cadence.com· 會有歡迎訊息及各功能的畫面說明。

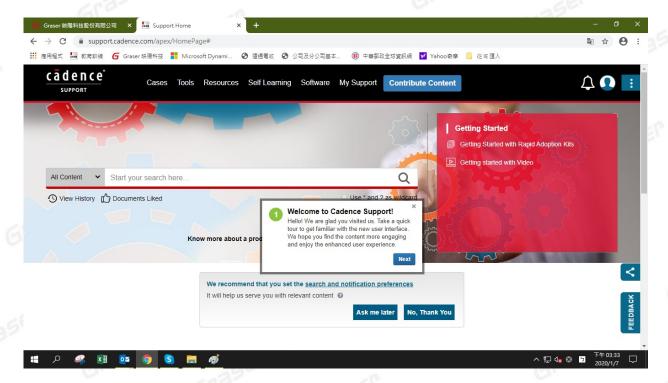




8. 建議您先進右上角的「My Account」,您可在裡面的「My Profile」修改個人資料。

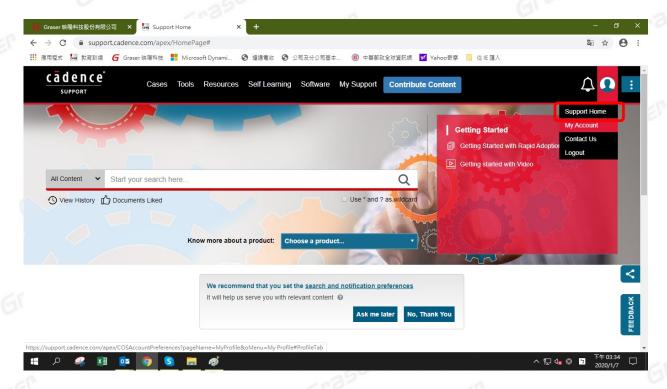


9. 進到「My Account」·最重要的是在「Notification Preferences」中設定要關注的產品品項。 請點擊「Step 1:Select Product」下面的「Edit Product List」。

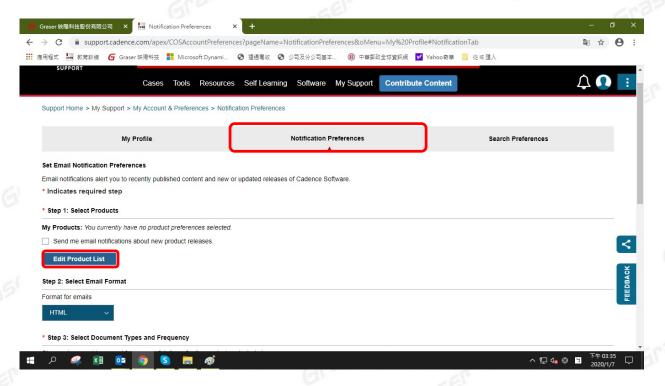




10. 請在「Product Selection」中將要關注的產品點選到右側的「Current Selection」才有效,完成點「DONE」。

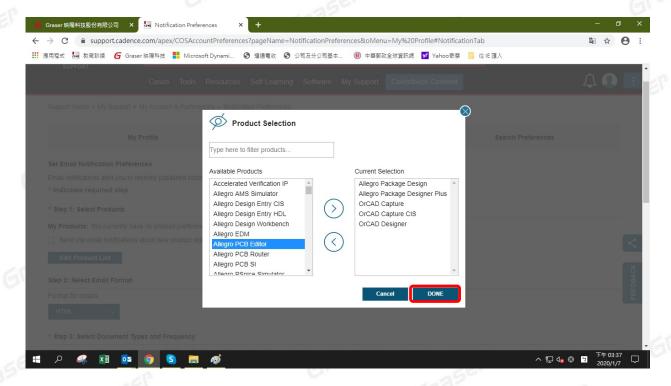

11. 在「Step 3:Select Document Types and Frequency」選擇所要的檔案類型如「Application Notes」及更新週期「Monthly」等。


然後點擊「Step 4: Select Software Update」下的「Edit Release List」設定產品更新通知。

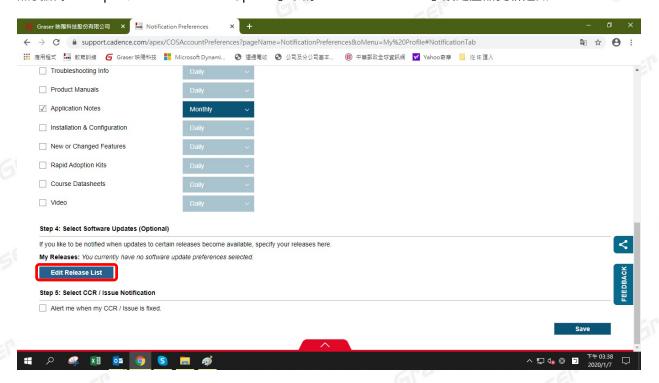




12. 在「Edit Release List」中設定產品及作業版本的更新通知,

如以下是對 SPB 的 17.2 / 17.4 的 Windows 版設定更新通知,當有更新會自動寄 Mail 通知您。

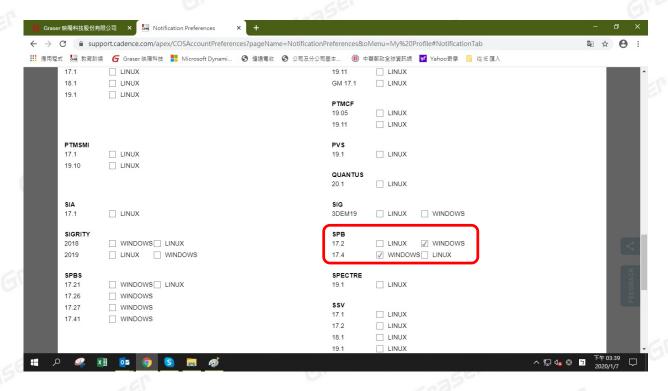

當有設定或修改記得最後要點擊「SAVE」儲存更新。

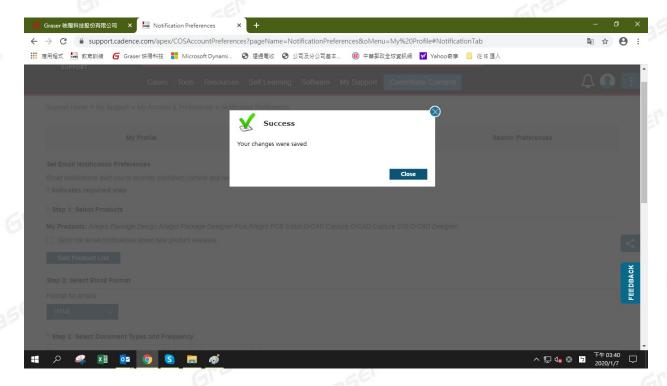





軟體程式下載操作流程

Grase

請選主選單中「Software」下的 「Download Software」。

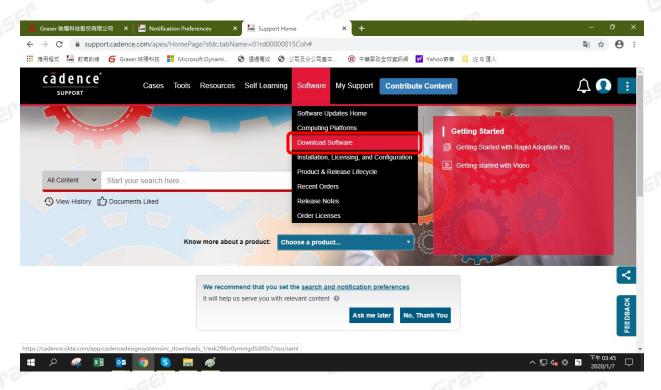


第一次請先設定下載的相關設定,一般是「Complete Media Images」完整來源,OS 為「Windows」。 還要記得要選「I Agree」接受相關規範,最後選底下的「Save Preference」儲存設定。

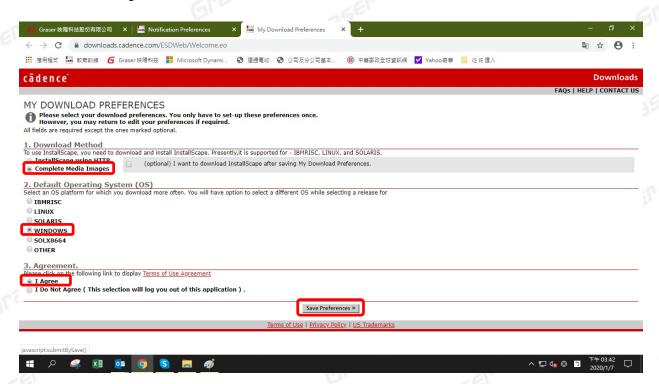




OrCAD / Allegro V17.4 請選 (WINDOWS) 下的 「OrCAD / Allegro 17.4 (SPB 17.4)」。 (若是 Sigrity2019 才請選底下的「SIGRITY2019」)

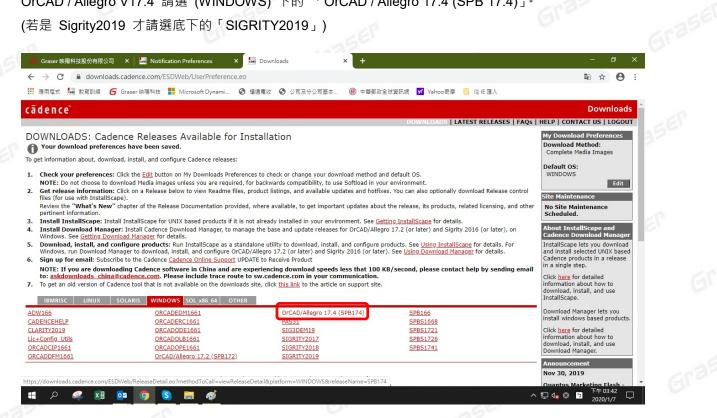

要下載 17.4 的 Hotfix 更新版·請點 Hotfix 那一段的 「Download」 就可開始下載最新更新版。 (要先安裝過原始標準版後才可以再安裝 Hotfix 更新版)

PS. 原始標準版才是 Base Release 下 SPB17.40.000 那段的兩個 Download。

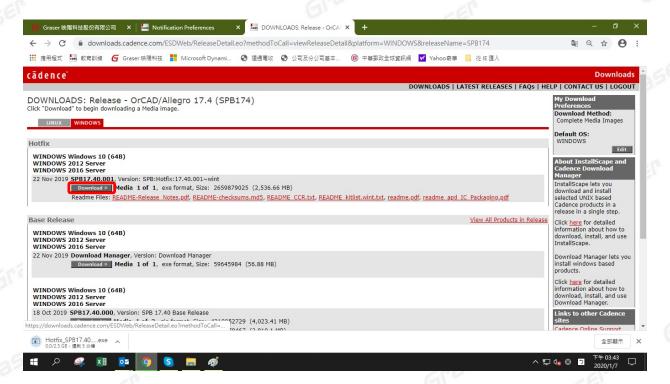



License 線上申請流程


(此部分僅適用於 Allegro 使用者)

Graser

Cadence Allegro V17.4 版本已正式發行,在『軟體維護期間』 內的 Allegro 客戶可自行上網連結至 Cadence 網站進行新版 License 申請。

Cadence 線上申請新版本 License 操作程序,請依下列步驟進行:

1. 在 Support.cadence.com 網頁中·請點選「Software」選單下的「Order License」項目進行 License 申請作業。

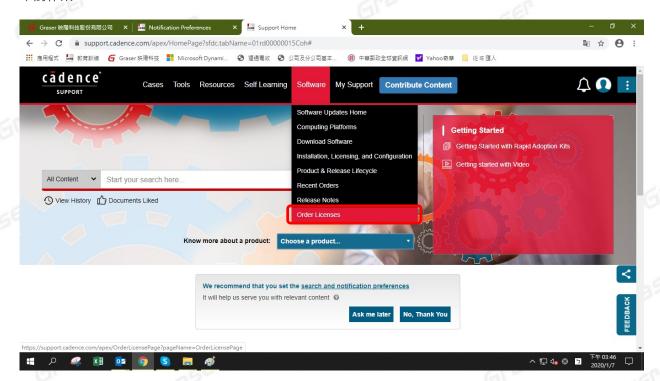




Graser

2. 請點選 「Show Release(s)」展開產品項目。

Graser

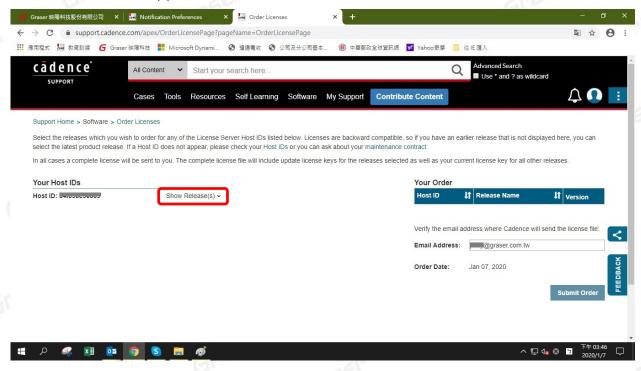


3. 請在列表中選取要申請 License 的產品及版本如 SPB 17.4 (或如 Sigrity2019)。






4. 經選取的產品及版本會列在網頁的右上方,確認無誤後請按下「Submit Order」送出申請,完成申請作業。

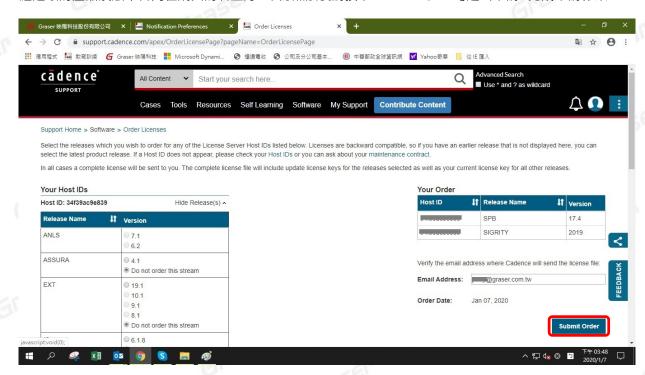

5. 當您送出申請後,原廠會進行確認。隨後會將 License 寄到您的郵件信箱。

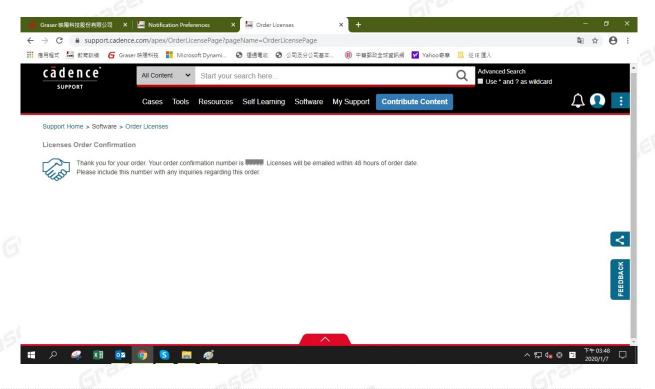



本版 Technic Note 版權為 映陽科技股份有限公司 所有,未經允許不得任意轉用。 © 2020 Graser Technology Co.,Ltd.